


所需工具和材料：

(1) DentaPure™ 滤芯 (2) 安装套件中的适配头 (3) 剪刀或锋利的小刀

DPC365B 安装步骤

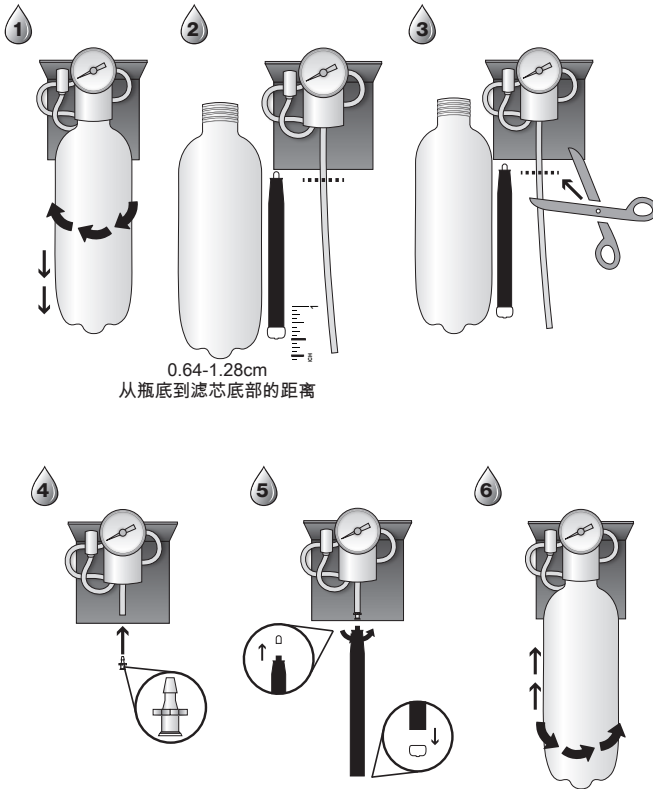

安装后：

- 检查进入到储水罐中的水压，将压力设定在 40-50 psi 之间。
- 开启牙椅手机、水枪管道，将牙椅水路中所有空气排净。

安装说明

DentaPure™牙椅水路净化器 DPC365M

DentaPure™ Cartridge DPC365M

所需工具和材料：

- 安装套件—包括1个固定支架、2个 Polyflo 接头
- 剪刀或锋利的刀
- 聚四氟乙烯水工胶带
- 活动扳手

1. 找到供水阀并关闭供水。确定滤芯放置位置，可在地箱内或地箱旁边，紧接在水压调节器之后，确保有足够的空间容纳滤芯而不会扭曲管道。
2. 将水压设定为 40-50 psi 之间。
3. 从滤芯两端取下蓝色的盖帽。将聚四氟乙烯胶带缠绕在接头螺纹上，然后在滤芯的两端安装随附的 1/4 英寸 (0.635cm) 或 5/8 英寸 (1.59cm) polyflo 接头 (具体选择哪种接头，由使用者的水管尺寸而定)。
4. 将滤芯放置在紧靠水压调节器之后，以保证对水路最大程度的处理 (请注意，滤芯不应处理痰盂/漱口水注入器的水，这可能需旁路接头)。确保滤芯按照滤芯主体上箭头所示的水流方向放置。用剪刀或小刀剪断水管。

注意：如果牙椅上有痰盂和漱口水注入器，请使用供水端水罐前面的的T形接头 (三通接头) 绕过它们。

5. 旋下最靠近地箱的一侧滤芯的 Polyflo 接头的黄铜固定器部分。将管道滑过固定器，然后将管道滑到滤芯的接头上。将固定器旋紧到接头上。

注意：如果管道外层有织物覆盖，请确保织物被固定在塑料固定器内。确保管道与滤芯连接后不会扭结。

6. 垂直握住滤芯，放一条毛巾在滤芯末端。打开水，让水流过滤芯，排净空气。
7. 在滤芯的另一侧重复步骤 5。
8. 如果需要，安装固定支架。将滤芯放入支架中。
9. 操作牙椅水路，检查水流是否通畅，排净管路中所有空气以及碳残渣。如要安装旁路接头 (如不想使用含碘的水时；痰盂、漱口杯)：关闭供水，打开水枪将水排出以降低水路水压，在滤芯前安装一个T型三通接头。

如果需要对接水路进行消毒处理，请关闭水源。旋松螺帽固定器，取下滤芯。将水路重新安装到旁路接头上。打开水源，使用水枪和手机排净水路中的空气。消毒处理完成后，重新将滤芯安装上。



Manufactured by:
Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
800-483-7433

Made in USA

3501006-SM / REV A - 10/2024

All company and product names are trademarks of Hu-Friedry Mfg. Co., LLC,
its affiliates or related companies, unless otherwise noted.

©2024 Hu-Friedry Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

CROSSTEX