


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DentaPure™ Cartridge DPI365B

STRUMENTI E MATERIALI NECESSARI:

(1) DentaPure™ Cartridge (2) Accessori per il kit d'installazione (3) Forbici o coltello affilato

Fasi d'installazione della cartuccia DPI365B.

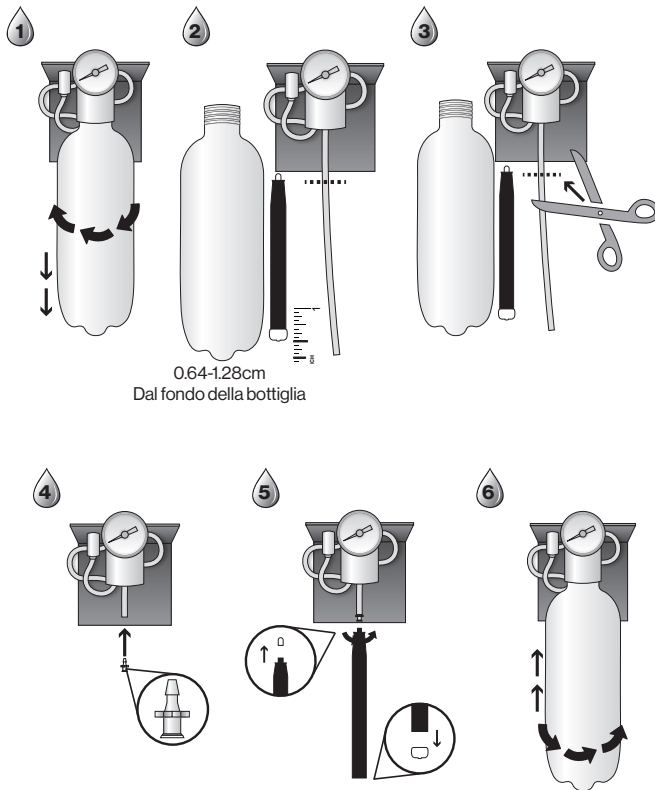

Una volta installata:

- Regolare la pressione dell'aria della bottiglia, impostata tra 40 e 50 psi.
- Azionare gli strumenti del riunito fino a quando l'aria non è stata del tutto eliminata dal sistema idrico.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

DentaPure™ Cartridge DPI365M

STRUMENTI UTENSILI E MATERIALI NECESSARI:

- Kit di installazione: include staffe di fissaggio, 2 raccordi 1 unità
- Forbici o coltello affilato
- Nastro in teflon
- Chiave inglese regolabile

1. Individuare e chiudere l'erogazione dell'acqua. Identificare il posizionamento della cartuccia nella scatola di giunzione o nelle sue vicinanze, subito dopo il regolatore di pressione dell'acqua, assicurandosi che ci sia abbastanza spazio per la cartuccia senza piegare il tubo.

2. Impostare la pressione del regolatore dell'acqua tra 40 e 50 psi.

3. Rimuovere i tappi blu dalle estremità della cartuccia. Avvolgere il nastro in teflon attorno alle filettature del raccordo e installare i raccordi polyflo da 1/4" (0,635 cm) o 5/8" (1,59 cm) inclusi (determinati dalle dimensioni della linea dell'acqua) su ciascuna estremità della cartuccia.

4. Posizionare la cartuccia subito dopo il regolatore di pressione dell'acqua in modo che venga trattata la massima quantità di linea dell'acqua. (Si prega di notare che la cartuccia non deve trattare la sputacchiera/riempi-bicchiere, potrebbe essere necessario una giunzione bypass). Assicurarsi che la cartuccia sia posizionata nella direzione del flusso dell'acqua come indicato dalle frecce sul corpo della cartuccia. Tagliare il tubo dell'acqua con le forbici o un coltello.

Nota: se l'unità ha un sputacchiera/riempi-bicchiere, bypassarli utilizzando un raccordo a "T" sulla linea di alimentazione prima della bottiglia d'acqua.

5. Svitare il fermo in ottone del raccordo polyflow sul lato della cartuccia più vicino alla giunzione. Far passare il tubo attraverso il fermo e farlo scivolare sul raccordo della cartuccia. Serrare il fermo sul raccordo.

Nota: se il tubo ha un rivestimento in tessuto, assicurarsi che il tessuto sia bloccato all'interno del fermo di plastica. Assicurarsi che il tubo non si attorcigli dopo essere stato montato sulla cartuccia.

6. Tenere la cartuccia in posizione verticale, posizionare un asciugamano sull'estremità della cartuccia. Aprire l'acqua e lasciarla scorrere per spurgare tutta l'aria.

7. Ripetere il passaggio 5 sul lato opposto della cartuccia.

8. Installare la/le staffa/e di supporto se desiderato/i. Collocare la cartuccia nella/e staffa/e.

9. Azionare gli strumenti dentali per controllare il flusso dell'acqua e spurgare l'aria e i residui del filtro a carbone dalle linee. Per installare la giunzione di bypass (da utilizzare quando non si desidera l'acqua iodata; ad esempio, configurazione a coppa cuspidale): disattivare l'alimentazione idrica e depressurizzare il sistema idrico azionando la siringa. Installare un raccordo a "T" prima della cartuccia.

Se si desidera trattare la linea, spegnere la fonte d'acqua. Rimuovere la cartuccia svitando i dadi di fissaggio. Reinstallarla sul raccordo di giunzione. Aprire l'acqua e spurgare il sistema idrico dall'aria utilizzando la siringa e il manipolo. Al termine del trattamento, reinstallare la cartuccia.



Manufactured by:
Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
800-483-7433

Made in USA
3501005-IT / REV A - 09/2024

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC,
its affiliates or related companies, unless otherwise noted.
©2024 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

CROSSTEX